



CATALOGO MEDICAZIONE AVANZATA

MADE IN ITALY

LH



Indice

Medicazioni in film di poliuretano pag. 06

Idrogel pag. 08

Medicazioni a base di idrocolloidi pag. 09

Medicazioni in alginato pag. 10

Medicazioni in schiuma di poliuretano pag. 11

Medicazioni con silicone pag. 12

Medicazioni con silicone pag. 13
Schiuma di poliuretano sottile con silicone

Medicazioni a base di argento ionico pag. 16

Medicazioni in pad assorbenti pag. 17

Medicazioni a Captazione Batterica pag. 18

Garze grasse pag. 19

Strategia LH Advance pag. 20
per la cura delle lesioni croniche





L'impegno di LOMBARDA H

LOMBARDA H, da sempre impegnata nello sviluppo di soluzioni affidabili e innovative per il settore sanitario, presenta la **LINEA LH ADVANCE**, una gamma completa di Medicazioni Avanzate pensata per supportare i professionisti nella gestione efficace delle lesioni cutanee acute e croniche.

Frutto di ricerca, competenza e attenzione alle reali esigenze cliniche, i prodotti della **LINEA LH ADVANCE** sono progettati per favorire un ambiente di guarigione ottimale, contribuendo al controllo dell'essudato, alla protezione dei tessuti e alla prevenzione delle complicanze infettive, nel rispetto del comfort e della sicurezza del paziente.

Questo catalogo intende offrire una guida chiara e funzionale alle soluzioni proposte, valorizzando un approccio terapeutico basato sull'evidenza scientifica e sulla personalizzazione del trattamento.

Con la **LINEA LH ADVANCE**, **LOMBARDA H** rinnova il proprio impegno nel migliorare la qualità dell'assistenza e nel supportare quotidianamente chi si prende cura della salute.

MEDICAZIONI IN FILM DI POLIURETANO



PHARMAFIX PU

film di poliuretano non sterile

Pharmafix PU non sterile è una medicazione in film di poliuretano trasparente, semipermeabile ideale per prevenzione e fissaggi. La sua principale funzione è quella di proteggere la medicazione e di conseguenza la ferita da agenti esterni quali liquidi e/o microrganismi.

Pharmafix PU consente lo scambio gassoso della cute o della ferita grazie alla sua ottima traspirabilità. Può rimanere in situ oltre i 7 giorni.

Il prodotto è stato progettato per consentire la semplice applicazione della pellicola, sopra medicazioni primarie, fasciature o per il fissaggio di tubi, ecc. La pellicola è altamente adattabile ed estensibile per aumentare il confort del paziente. Il modo di applicazione risulta intuitivo e semplice. La rimozione risulta facilitata grazie alla tecnica stretch.

FIXPU10010000 10cmx10mt

PROTECTFILM

film di poliuretano sterile

Protectifilm sterile è una medicazione in film di poliuretano trasparente, semipermeabile ideale per ferite asciutte, con leggere secrezioni o come fissaggio sterile. La sua principale funzione è quella di proteggere e mantenere indisturbata la guarigione della ferita, oltre che per il fissaggio di cateteri centrali e periferici.

Il modo di applicazione guidato risulta intuitivo e semplice anche grazie alle indicazioni numerate presenti sulla medicazione stessa. Tale sistema riduce drasticamente gli sprechi legati alle possibili contaminazioni dovute all'operatore. Il prodotto sarà applicato senza essere toccato dai guanti dell'operatore stesso. L'applicazione può essere fatta con una sola mano. La rimozione risulta facilitata grazie alla tecnica stretch.

Protectfilm consente lo scambio gassoso della ferita grazie alla sua ottima traspirabilità. Può rimanere in situ dai 7 ai 10 giorni.

PROT6070 6x7 cm
PROT100120 10x12 cm

PROT150200 15x20 cm
PROT100250 10x25 cm



MEDICAZIONI IN FILM DI POLIURETANO



PHARMAPORE PU IV

film di poliuretano con taglio a U

Pharmapore PU IV è una medicazione in film di poliuretano trasparente pretagliato, semipermeabile indicata per il fissaggio e la protezione dei punti di inserzione di dispositivi intravascolari. Il film di poliuretano garantisce la protezione del sito di inserzione del catetere, mantenendo all'esterno i liquidi ed eventuali agenti contaminanti. Il particolare adesivo aumenta la durata in situ del dispositivo pur garantendo un'ottima traspirabilità della cute sottostante e una ottima tenuta del dispositivo intravascolare. Il fissaggio è puntuale e sicuro. Il prodotto si presenta sottile, maneggevole, flessibile e conformabile. Il modo di applicazione risulta intuitivo, semplice e veloce anche con l'uso dei guanti. La rimozione risulta facilitata grazie alla tecnica stretch.

Pharmapore PU IV consente lo scambio gassoso della ferita grazie alla sua ottima traspirabilità. Può rimanere in situ dai 7 ai 10 giorni.

IVFS76 6x7 cm

IVPU7090 9x7 cm

PHARMAPORE PU FS ADV

film di poliuretano con taglio a U rinforzato in tnt

Pharmapore PU IV frame style advance è una medicazione di fissaggio sterile, conformabile, costituita da film di poliuretano trasparente ad alta traspirabilità con taglio a U e rinforzi perimetrali in tessuto non tessuto i quali garantiscono una perfetta tenuta del catetere.

La medicazione è dotata di comodi cerotti ferma lume e zona di trascrizione adibita ad annotazioni quali la data di cambio di medicazione stessa. Dispositivo sicuro, flessibile e resistente alle forze di taglio e di stiramento non si deforma durante l'uso. Medicazione specificatamente studiata per gli accessi vascolari.

Di facile utilizzo grazie all'applicazione tramite ali laterali, maneggevole e dalle altissime prestazioni.

IVFS857ADV 8,5x7 cm

IVFS1012ADV 10x12 cm

IVFS85115ADV 8,5x11,5 cm



CAVIDAGEL

Cavidagel è un gel a base di polimeri idrofili, amorfo, sterile con al suo interno alginato di sodio; tale formulazione crea una combinazione unica di proprietà idratanti e assorbenti, fornendo così condizioni ottimali per la guarigione delle ferite (riparazione tissutale).

Cavidagel viene utilizzato per reidratare i tessuti necrotici e assorbe i detriti e l'essudato ove necessario, facilitando lo sbrigliamento autolitico e la guarigione delle ferite in ambiente umido.

Cavidagel è usato per gestire, proteggere e ridurre al minimo il rischio di infezione delle ferite.

È indicato per le ferite necrotiche secche e umide, nonché ferite che presentano una combinazione di tessuto necrotico e di granulazione. Cavidagel è destinato al trattamento delle ulcere degli arti inferiori, piaghe da decubito e ferite in genere che devono essere fortemente reidratate. Il prodotto può rimanere in situ per più di 7 giorni.

CAVT15 15gr



MEDICAZIONI A BASE DI IDROCOLLOIDI



LINEA PHARMACOLL

I prodotti della linea Pharmacoll sono medicazioni avanzate elastiche adesive a base di idrocolloidi laminati su un supporto in pellicola di poliuretano semipermeabile.

Le medicazioni Pharmacoll a contatto con l'essudato formano un gel, il quale promuove la guarigione in ambiente umido, favorendo la granulazione e la riepitelizzazione della ferita.

La formazione del gel impedisce ai prodotti Pharmacoll di aderire alla ferita e garantisce una rimozione senza causare dolore e senza danneggiare

i bottoni di granulazione e/o il tessuto epiteliale. Pharmacoll accelera il processo di guarigione fornendo l'ambiente ideale per la formazione del tessuto di granulazione.

La linea Pharmacoll è utilizzata per la cura delle ferite da poco a mediamente secernenti. Adatte per lesioni da decubito, ustioni di secondo grado, ulcere agli arti inferiori, ferite croniche a lenta guarigione e abrasioni. Ottime come presidio da utilizzare in prevenzione.

PHARMACOLL

Idrocolloidi senza bordo adesivo



COLL100100 10x10 cm

COLL200200 20x20 cm


COLLT100100 10x10 cm

COLLT150150 15x15 cm

COLL150150 15x15 cm

PHARMACOLL COMFORT

Idrocolloidi con bordo adesivo

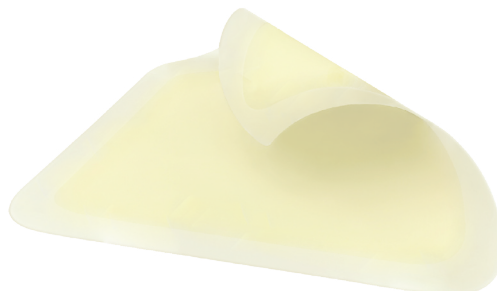

PHARMACOLL COMFORT

Idrocolloidi conformati

COLLC100100 10x10 cm

COLLT150150 15x15 cm

COLLBC180165 16,5x18 cm (tallone)

MEDICAZIONI IN ALGINATO



PHARMA ALGI F

Pharma-Algi-F è una medicazione avanzata assorbente con funzione di emostasi, utilizzata principalmente per ferite a spessore parziale e totale, con medio o abbondante essudato. La medicazione è costituita da fibre pure di alginato di calcio, cardate e agugliate in modo da formare un "feltro" assorbente. La sua tecnologia di assorbimento C-Lock trattiene l'essudato e i detriti della lesione all'interno delle fibre, garantendo quindi la pulizia e la gestione ottimale dell'essudato e la normale guarigione in ambiente umido.

Pharma-Algi-F viene utilizzata per medicare ferite post-operatorie, ulcere degli arti inferiori, ulcere da decubito, ulcere diabetiche, ferite traumatiche, ferite cavarie, sito per innesto e sito donatore, carcinomi fungiformi, ustioni a spessore superficiale e parziale.

Il dispositivo risulta di facile applicazione, molto conformabile anche nelle lesioni di quarto grado sotto minate.

PADALGIF100100 10x10 cm

PADALGIF240 2x40 cm



ALGINATO CON ARGENTO

La medicazione antimicrobica in alginato AG è una medicazione altamente assorbente, sterile, in fibre tessute a base di alginato di calcio G (con un alto contenuto di acido glucuronico), carbossimetilcellulosa sodica (CMC) e ioni argento. In presenza di fluidi della ferita, la medicazione rilascia ioni argento, mentre l'essudato viene assorbito dalle fibre di alginato/CMC. Il gel formato da tale combinazione favorisce il debridement autolitico, mantiene il giusto ambiente umido atto alla guarigione ottimale della ferita e assicura la rimozione indolore della medicazione stessa.

Gli ioni argento rilasciati dalla medicazione sono potenti agenti antimicrobici efficaci contro un ampio spettro di microrganismi comunemente associati alla colonizzazione batterica e all'infezione della ferita. Tale attività garantisce una copertura antimicrobica fino a quattordici giorni.

La medicazione è inoltre dotata di un'efficace azione emostatica grazie alla presenza di ioni calcio, i quali attivano le piastrine favorendo dunque l'emostasi.

LH005 5x5 cm

LH020 10x20 cm

LH010 10x10 cm

LH230 2,5x30,5 cm



MEDICAZIONI IN SCHIUMA DI POLIURETANO



LINEA ESPUMA

Le medicazioni della linea Espuma sono composte da schiume di poliuretano altamente assorbenti, atraumatiche alla rimozione con uno strato esterno in film di poliuretano traspirante a prova di liquidi, virus e batteri. Grazie alla loro elevata capacità di assorbimento abbiamo una riduzione dei cambi di medicazione consentendo quindi una guarigione indisturbata. La particolare conformazione (Tecnologia Exulock) delle celle di poliuretano consente di trattenere l'essudato, riducendo il rischio di fuoriuscite anche sotto elastocompressione.

I dispositivi della linea Espuma durante il normale assorbimento degli essudati si conformano gradualmente alla ferita, andando a riempire anche le micro asperità. Tale modifica del loro stato garantisce una giusta copertura di tutta l'area da trattare. Gli essudati si distribuiscono su tutta la superficie della medicazione, in modo da minimizzare il rischio di macerazione della cute peri lesionale. Lo strato non aderente a contatto con la ferita garantisce una rimozione facile ed indolore.

ESPUMA NON ADHESIVE

Schiuma di poliuretano senza bordo adesivo



ESPUMA8090 8x9 cm (tracheo)

ESPUMA7575 7,5x7,5 cm

ESPUMA 150150 15x15 cm

ESPUMA100100 10x10 cm

ESPUMA200500 20x50 cm

ESPUMA ADHESIVE

Schiuma di poliuretano con bordo conformata tallone e sacro



ESPUMAADH165180 16,5x18 cm (tallone)

ESPUMAADH220220 22x22 cm (sacrale)

ESPUMA SEALED EDGES

Schiuma di poliuretano senza bordo adesivo con bordi saldati



ESPUMAS100100 10x10 cm

ESPUMA120130 13x12 cm (tallone)

ESPUMA COMFORT PLUS

Schiuma di poliuretano conformata con bordo adesivo



ESPADHPLUS160180 16x18 cm (tallone)

MEDICAZIONI CON SILICONE



ESPUMA GENTLE COMFORT

Si tratta di una medicazione pluristratificata formata da un film esterno in poliuretano semipermeabile ad alta traspirabilità; una schiuma di poliuretano idrocellulare costituita da celle miste super assorbenti con tecnologia EXULOCK ed uno strato a contatto con la lesione in silicone medicale.

Tale strato rende la medicazione aderente in maniera micro selettiva; aderisce quindi delicatamente alla cute secca, mentre non aderisce a contatto con il letto umido della ferita stessa. Atraumatica alla rimozione.

Espuma Gentle Comfort è una medicazione avanzata per il trattamento di ferite con elevata quantità di essudato come ulcere agli arti inferiori, ustioni, lesioni da decubito, ulcere diabetiche, ferite post-operatorie.

Il dispositivo assolve la propria funzione di assorbimento anche sotto bendaggio elastocompressivo.

Il particolare strato di contatto in silicone, rende la medicazione adattabile a essere sagomata per esempio per la testa, i gomiti o i talloni o per la zona sacrale.

Il particolare gel in silicone nello strato di contatto garantisce un assorbimento verticale degli essudati e previene qualsiasi fenomeno di macerazione della cute perilesionale. Tale caratteristica garantisce quindi il mantenimento dell'ambiente umido importante per la guarigione della ferita stessa.

ESPGC100100 10x10 cm

ESPGC150150 15x15 cm

**ESPGC180165 18x16,5 cm
(tallone)**



MEDICAZIONI CON SILICONE



ESPUMA GENTLE LITE

Espuma Gentle Lite è una medicazione pluristratificata formata da un film esterno in poliuretano semipermeabile ad alta traspirabilità; una schiuma di poliuretano idrocellulare costituita da celle miste super assorbenti con tecnologia EXULOCK ed uno strato a contatto con la lesione in silicone medicale.

Tale strato rende la medicazione aderente in maniera micro selettiva; aderisce quindi delicatamente alla cute secca, mentre non aderisce a contatto con il letto umido della ferita stessa.

Espuma Gentle Lite è una medicazione avanzata per il trattamento di ferite con basse quantità di essudato come ulcere agli arti inferiori, ustioni, lesioni da decubito, ulcere diabetiche, ferite post-operatorie.

Il particolare strato di contatto in silicone, rende la medicazione adattabile a essere sagomata; per esempio per la testa, i gomiti o i talloni o per la zona sacrale.

Il particolare gel in silicone nello strato di contatto garantisce un assorbimento verticale degli essudati e previene qualsiasi fenomeno di macerazione della cute peri lesionale. Tale caratteristica garantisce quindi il mantenimento dell'ambiente umido importante per la guarigione della ferita stessa.

ESPGL6085	6x8,5 cm	ESPGL200200	20x20 cm
ESPGL100100	10x10 cm	ESPGL200500	20x50 cm



MEDICAZIONI CON SILICONE



ESPUMA GENTLE TRASFER

Espuma Gentle Transfer è una medicazione avanzata primaria bistratificata formata da una schiuma di poliuretano assorbente costituita da celle aperte super assorbenti e drenati (Climbed Technology) ed uno strato a contatto con la lesione in silicone medicale.

Tale strato rende la medicazione aderente in maniera micro selettiva; aderisce quindi delicatamente alla cute secca, mentre non aderisce a contatto con il letto umido della ferita stessa.

Espuma Gentle Transfer è una medicazione avanzata per il trattamento di ferite con elevate e importanti quantità di essudato come ulcere agli arti inferiori, ustioni, lesioni da decubito, ulcere diabetiche, ferite post-operatorie, ulcere tumorali e epidermolisi bollosa.

Il particolare strato di contatto in silicone, rende la medicazione adattabile a essere sagomata per ogni zona del corpo.

Il particolare gel in silicone nello strato di contatto garantisce un assorbimento verticale degli essudati e previene qualsiasi fenomeno di macerazione della cute perilesionale. Tale caratteristica garantisce quindi il mantenimento dell'ambiente umido importante per la guarigione della ferita stessa.

Espuma Gentle Transfer necessita di medicazione secondaria assorbente.

ESPGT200500 20x50 cm



MEDICAZIONI CON SILICONE



SILOTULL

Silotull è una medicazione avanzata costituita da una rete di fibre (poliestere/polietilene) ricoperta da silicone medicale.

Silotull rientra tra le medicazioni primarie di contatto, il silicone consente di rimuovere la medicazione senza causare dolore o traumi al tessuto di nuova formazione. Medicazione a micro aderenza selettiva.

Silotull non ha proprietà assorbenti, ma consente il passaggio degli essudati dal letto della ferita ad una medicazione secondaria con funzione assorbente. La sua struttura a rete facilita l'ispezione della ferita durante l'applicazione e per tutta la durata del trattamento.

Non aderisce al letto umido della ferita, ma alla pelle sana e asciutta (perilesionale).

Rimozione totalmente indolore.

Medicazione riposizionabile.

Riduzione della macerazione della cute perilesionale.

Silotull è utilizzato nel trattamento delle ferite in cui è necessario evitare il continuo cambio di medicazione; parliamo di ferite in fase rosa-rossa in via di guarigione.

Le applicazioni tipiche includono ulcere, lacerazioni o abrasioni della pelle, ablazioni chirurgiche, ustioni di secondo grado, innesti a spessore totale o parziale, ustioni da radioterapia, sito donatore.

Può essere lasciato in situ per più di sette giorni, anche quando la medicazione secondaria assorbente viene sostituita con più frequenza.

SIL05075 5x7,5 cm

SIL0100180 10x18 cm

SIL075100 7,5x10 cm

SIL0200300 20x30 cm



MEDICAZIONI A BASE DI ARGENTO IONICO

Schiuma di poliuretano con Argento



DIFA AG

Difa Ag fa parte della famiglia di tecnologia Exulock (adesiva e non adesiva) è una medicazione in schiuma di poliuretano antimicrobica assorbente e atraumatica con strato di supporto super assorbente. La schiuma con tecnologia Exulock ha caratteristiche super assorbenti, quindi a contatto con gli essudati della ferita, la schiuma assorbe in modo massiccio tutti gli essudati formando un gel morbido e coerente che si blocca all'interno della matrice di schiuma, fornendo un sistema di gestione degli essudati super con una delicata azione gelificante che consente una facile rimozione della medicazione stessa.

La medicazione ha uno strato esterno laminato in poliuretano impermeabile.

Difa AG è una medicazione avanzata antibatterica e antivirale che impedisce l'attacco degli stessi grazie alla presenza di ioni d'argento, la famiglia Difa Ag Exulock ha un'attività antimicrobica ad ampio

spettro che aiuta a ridurre la contaminazione della ferita e agisce come barriera antimicrobica per le ferite ad alto rischio di infezione.

Gli ioni argento vengono rilasciati quando la medicazione entra in contatto con l'essudato, la loro azione battericida consiste nell'entrare velocemente dentro la membrana cellulare dell'agente patogeno e disattivarlo definitivamente andando a lavorare sul nucleo bloccando la replicazione cellulare.

Difa Ag, rilascia ioni Ag⁺ per molto tempo, si riconosce ancora una forte attività anche dopo i 7 giorni.

Grazie alla sua elevata capacità di assorbimento riduce i cambi di medicazione consentendo una guarigione indisturbata

DIFAAG100100 10x10 cm

DIFAAG150150 15x15 cm

DIFAAG100200 10x20 cm

DIFAAG200200 20x20 cm


DIFAAGADHPLUS100100 10x10 cm

DIFAAGADHPLUS150150 15x15 cm

DIFA AG
Schiuma di poliuretano
senza bordo adesivo con argento



DIFA AG ADHESIVE
Schiuma di poliuretano
con bordo adesivo con argento

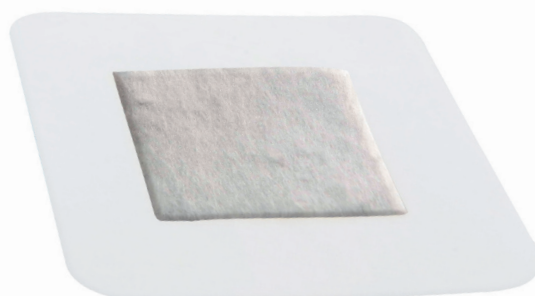

MEDICAZIONI IN PAD ASSORBENTI

LH

VILOWOND

Vilowond Pad è un tampone multistrato per la gestione degli essudati. È morbido, confortevole e può essere utilizzato sotto bendaggio elastocompressivo.

La medicazione è ricoperta da uno strato morbido di tessuto non tessuto. La superficie interna ha un'elevata attività capillare, consentendo l'assorbimento degli essudati della ferita nel nucleo assorbente centrale della polpa di cellulosa (fluff). Non lascia residui dopo il suo utilizzo.

La linea di prodotti Vilowond Pad è indicata per assorbire gli essudati di ferite da moderatamente ad altamente essudanti

La medicazione può rimanere in situ da 5 a 8 giorni, o quantomeno fino a saturazione avvenuta.

VIL0100100 10x10 cm

VIL0200200 20x20 cm

VIL0100200 10x20 cm



EXSORB

Exsorb Pad è una medicazione completa non adesiva a captazione batterica, per ferite molto essudanti, realizzata con una miscela di fibre acriliche super assorbenti e fibre di viscosa, laminate termicamente a una rete in PE trasparente a bassa aderenza. La medicazione assorbe e interagisce con gli essudati della ferita per formare un gel morbido, idrofilo e permeabile ai gas il quale fornisce un ambiente umido ideale per la guarigione.

Exsorb Pad è ideale per ferite acute e croniche molto essudanti, ad esempio ulcere agli arti inferiori, lesioni da decubito, siti donatori e ferite post-operatorie.

PADEX100100 10x10 cm

PADEX200200 20x20 cm

PADEX100200 10x20 cm



MEDICAZIONI ASSORBENTI A CAPTAZIONE BATTERICA



FIBROSOL

Fibrosol è una medicazione avanzata idroattiva di nuova concezione a captazione batterica.

Fibrosol è una medicazione le cui caratteristiche principali sono l'elevata capacità di assorbimento e di ritenzione dei liquidi. La medicazione si attiva a contatto con l'essudato trasformandosi in un morbido gel coesivo, che mantiene l'ambiente umido, favorendo così i principali processi di guarigione.

Fibrosol assorbe, gelifica istantaneamente e soprattutto, trattiene all'interno delle sue fibre quantità di essudato importanti che vengono efficacemente gestite anche sotto elasto-compressione.

L'azione gelificante, oltre a gestire gli essudati, agevola la rimozione di eventuali residui cellulari e batterici inglobandoli nella sua matrice gelatinosa (captazione batterica).

Fibrosol offre eccellenti capacità di assorbimento e ritenzione per ferite da moderatamente ad altamente essudanti. Assorbimento verticale.

Si adatta alla superficie della ferita entrando nelle sue asperità per formare un contatto completo. Nessun restringimento

Agisce come barriera per batteri e virus, impedendo la contaminazione dall'esterno della ferita

Aiuta a ridurre il dolore quando la medicazione è in situ.

Assenza di residui dopo la rimozione in quanto le fibre sono fitte e consistenti. (Fibrosol può essere richiesto anche nella versione super-rinforzata)

Contribuisce alla guarigione delle lesioni, fornendo un ambiente umido ottimale per la guarigione delle ferite.

Viste le sue caratteristiche molto performanti, tale medicazione può rimanere in situ dai 7 ai 10 giorni.

FIB100100 10x10 cm

FIB150150 15x15 cm

FIBEX100100 10x10 cm

RINFORZATO IN ROTOLO



GARZE GRASSE



PHARMATULL


Pharmatull è una garza in cotone impregnata di sostanza grassa, il dispositivo viene utilizzato come medicazione primaria in tutte le lesioni granuleggianti.

Pharmatull consente il passaggio degli essudati della ferita ad una medicazione secondaria assorbente.

Pharmatull viene utilizzata come medicazione primaria, il contatto intimo con la ferita è indicato nel trattamento di ustioni, ulcere, innesti cutanei e una varietà di lesioni traumatiche.

La medicazione viene utilizzato anche come mezzo di trasferimento per la cute durante l'innesto.

TULL100100 10x10 cm **TULL100400 10x40 cm**

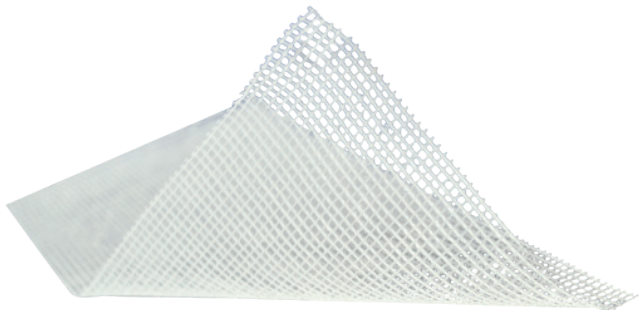

DIFA PLUS

Difa Plus è una garza di paraffina contenente clorexidina acetato B.P. 0,5% p/p, il dispositivo ha un effetto antimicrobico contro un'ampia gamma di batteri Gram positivi e Gram negativi.

Difa Plus viene utilizzata come medicazione primaria, il contatto intimo con la ferita serve nel trattamento di ustioni, ulcere, innesti cutanei e una varietà di lesioni traumatiche.

La medicazione viene utilizzato anche come mezzo di trasferimento per la cute durante l'innesto.

Sotto il controllo medico di un operatore sanitario, Difa Plus può essere utilizzato per gestire ferite infette o ferite in cui vi è un aumentato rischio di infezione.

Difa Plus deve essere conservato in un luogo fresco e asciutto.

DIFAPLUS100100 10x10 cm


MEDICAZIONI A CONTATTO:
CLOREXIDINA 0,5% vs IODOPOVIDONE 10%

CLOREXIDINA 0,5%	IODOPOVIDONE 10%
Protezione Prolungata Effetto attivo per ore	Protezione Breve Azione immediata
Altamente Tollerata Sicura su cute fragile	Irritante Può causare bruciore
Uso Mucose & Aree Sensibili Delicata sui tessuti	Limitato sulle Mucose Rischio di Irritazione
Non Macchia Facile Monitoraggio	Macchia la Pelle Difficile Controllo
Riduce Rischio di Infezioni Favorisce la Guarigione	Protezione Limitata Rischio di Complicanze

CLOREXIDINA 0,5% — LA PRIMA SCELTA!

✓ *Superiore allo iodopovidone 10% in protezione continua, sicurezza e comfort del paziente!*

STRATEGIA LH ADVANCE PER LA CURA DELLE LESIONI CRONICHE

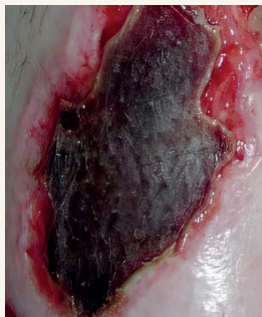CONDIZIONE CLINICA		Prodotti Raccomandati		Note
FERITA NECROTICA		Ferita scarsamente essudante	"Cavidagel (med. primaria) + Pharmacoll (med. di copertura)"	
		Ferita moderatamente essudante	"Fibrosol o Fibrosol Extra (med. primaria) + Pharmacoll (med. di copertura)"	Proteggere la cute perilesionale con crema BSoft allo Zinco
		Ferita altamente essudante	"Fibrosol Extra Non-adhesive (med. primaria) + Espuma Adhesive o Espuma Gentle o Exsorb (med. di copertura)"	Proteggere la cute perilesionale con crema BSoft allo Zinco
ESACARA DUTA (ES. TALLONE)		Ferita secca ispessita	"Espuma Gentle (sagomata a pozzetto) + Cavidagel + Protect Film o Pharmacoll Thin "	Medicazione a Pozzetto sostituire solo Cavidagel e Protect film fino all'idratazione completa dell'escara
FERITA FIBRINOSA /SLOUGH		Ferita Secca	"Cavidagel (med. primaria) + Pharmacoll Thin (med. di copertura)"	
		Ferita scarsamente essudante	"Cavidagel (med. primaria) + Pharmacoll o Espuma Genle Lite (med. di copertura)"	
		Ferita moderatamente essudante	"Fibrosol o Fibrosol Extra (med. primaria) + Pharmacoll (med. di copertura)"	Proteggere la cute perilesionale con crema BSoft allo Zinco
		Ferita altamente essudante	"Fibrosol o Fibrosol Extra Non-adhesive (med. primaria) + Espuma o Espumas o Espuma Gentle o Exsorb (med. di copertura)"	Proteggere la cute perilesionale con crema BSoft allo Zinco
FERITA GRANULEGGIANTE		Ferita scarsamente essudante	Espuma o Espuma Gentle Comfort o Lite OPPURE Silotull (primaria) + Vilowond (copertura)	con Silotull sostituisco solo la med di copertura
		Ferita moderatamente essudante	"Fibrosol o Pharma Algi-F (med. primaria) + Pharmacoll (med. di copertura)"	azione emostatica
		Ferita altamente essudante	"Fibrosol o Fibrosol Extra (med. primaria) + Espuma o Espuma Gentle o Exsorb (med. di copertura)"	Proteggere la cute perilesionale con crema BSoft allo Zinco

STRATEGIA LH ADVANCE PER LA CURA DELLE LESIONI CRONICHE

CONDIZIONE CLINICA		Prodotti Raccomandati		Note
FERITA IN FASE DI RIEPITELIZZAZIONE		Ferita scarsamente essudante	Pharmacoll Thin o Espuma Gentle Lite o Espumas OPPU- RE Silotull (med. Primaria) + Vilowond (med. di copertura)	
SKIN TEARS /LACERAZIONI		Ferita sanguinante	"Pharma-Algi F (med. primaria) + Espuma o Espumas o Espuma Gentle (med. di copertura)"	Proteggere la cute perilesionale con crema BSoft allo Zinco
		Ferita apparentemente chiusa	"Pharmastrip e/o Silotull (med. primaria) + Espuma o Espuma Gentle (med. di copertura)"	
		Perdita di pelle, parziale o completa	"Silotull o Pharmatull (med. primaria) + Espuma Gentle (med. di copertura)"	
USTIONI		Superficiale	Pharmatull + eventuale Vilowond	Se essudante, proteggere la cute perilesionale con crema BSoft allo Zinco
		Spessore superficia- le/parziale	"Silotull (med. primaria) + Espuma (med. di copertura)"	
		Spessore profondo/ parziale	"Silotull o Espuma Gentle Transfer (med. primaria) + Exorb o Vilowond (med. di copertura)"	
		A tutto spessore	"Espuma Gentle Transfer (med. primaria) + Exorb o Vilowond (med. di copertura)"	
FERITE INFETTE		Ferita scarsamente essudante	DifaAG o DifaAdhesiveAG OPPURE DifaPlus (primaria) + Vilowond (secondaria)"	
		Ferita moderatamente essudante	DifaAG o DifaAdhesiveAG	Proteggere la cute perilesionale con crema BSoft allo Zinco
		Ferita altamente essudante	"Alginato AG (med. primaria) + DifaAG o DifaAdhesiveAG (med. di copertura)"	Proteggere la cute perilesionale con crema BSoft allo Zinco





LINEA LH ADVANCE, MOLTO DI PIU'

UN SISTEMA INTEGRATO PER LA GESTIONE AVANZATA DELLE LESIONI

La nostra proposta non si limita alla fornitura di medicazioni avanzate, ma si configura come un **modello strutturato di supporto clinico e organizzativo**, finalizzato a garantire appropriatezza terapeutica, efficienza gestionale e miglioramento degli esiti assistenziali.

Accanto a una gamma completa e tecnologicamente evoluta di dispositivi per il trattamento delle lesioni acute e croniche, l'azienda offre un percorso integrato che comprende:

Formazione specialistica

Progettiamo e realizziamo programmi di formazione dedicati al personale sanitario, con contenuti aggiornati secondo le più recenti evidenze scientifiche e linee guida nazionali e internazionali.

I percorsi formativi sono modulabili in base al livello di competenza del team e agli obiettivi della struttura, con focus su:

- valutazione clinica della lesione
- scelta appropriata della medicazione
- gestione delle complicanze
- ottimizzazione dei percorsi assistenziali

L'obiettivo è promuovere competenze condivise, uniformità di approccio e continuità assistenziale.

Sviluppo di protocolli personalizzati

Supportiamo le strutture nella definizione e implementazione di **protocolli operativi** su misura, costruiti in base alle specificità organizzative, ai setting assistenziali e alla tipologia di pazienti trattati.

L'elaborazione del protocollo avviene attraverso:

- analisi preliminare dei bisogni clinici e organizzativi
- valutazione dei flussi e delle modalità operative esistenti
- definizione di procedure standardizzate e indicatori di monitoraggio

Noi di **Lombarda H** riteniamo che il valore di una medicazione avanzata non risieda esclusivamente nelle sue caratteristiche tecnologiche, ma nella sua corretta integrazione all'interno di un protocollo condiviso e di un percorso assistenziale strutturato.

Per questo ci proponiamo come **partner tecnico-scientifico**, affiancando le strutture sanitarie in un percorso di crescita professionale e organizzativa volto al miglioramento continuo della qualità delle cure.



Lombarda H S.r.l.
Loc. Faustina
20080 Albairate (MI)
T +39.02.9492.0509
F +39.02.9492.0515
lh@lombardah.com

www.lombardah.com